


輸備血系統(新版)

資訊室

陳銘偉


系統流程

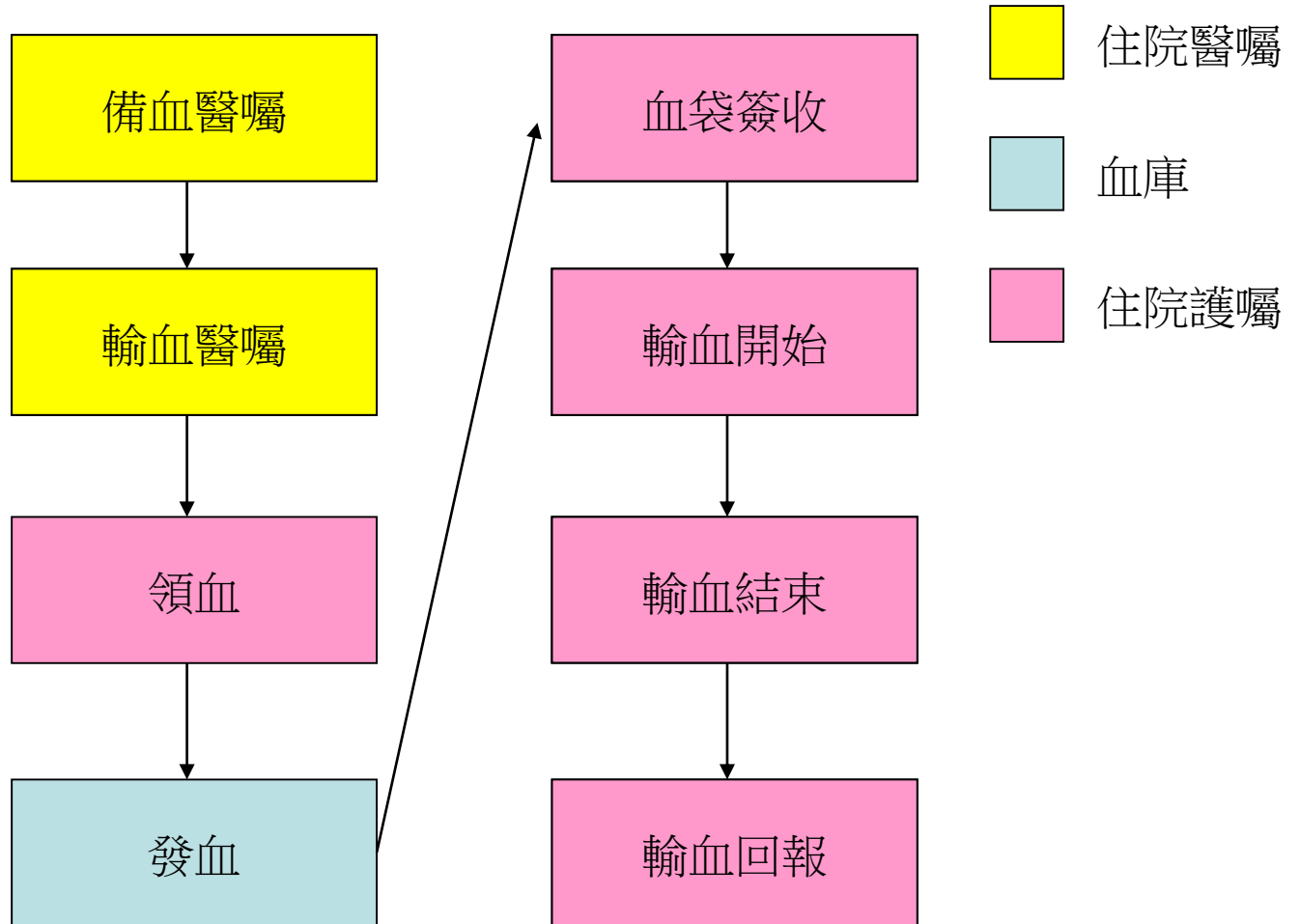

備血醫囑開立(1)

入口：醫囑新增->血庫醫囑->備血,領血

(待正式上線後會將入口至於右鍵醫令開立功能中)

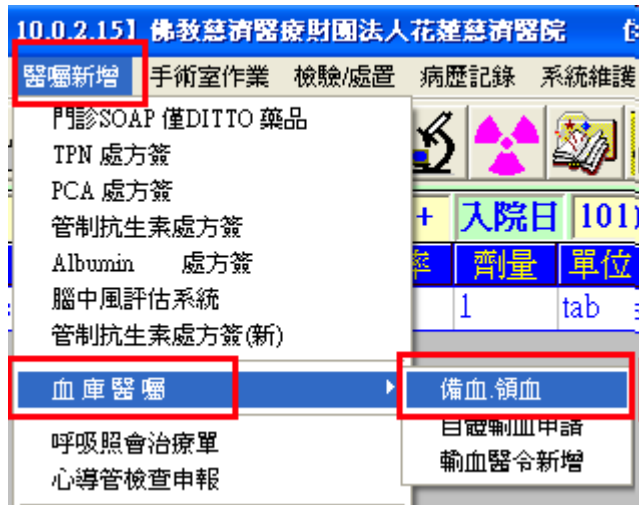

1.輸入預訂用血日期

2.填寫預備血之血品數量

3.勾選備領血原因

4.申請確認

常規備血作業

紀錄 各術式最大備血量參考 申請確認 離開(Esc) 重印 各血品名稱及適應症說明

病歷號 TEST3 門 護*測試3 女 12歲 B+ D-05 申請醫師 TQIP小組 申請科別 家醫科

診斷 Biopsy cornea 不規則抗體 輸血反應

參考值 Hb Ht PT APTT Platelet Alb 口述血型 B

備血方式 常規 急 口頭 最緊急

病歷首頁 病患自述血型 無記錄

上次輸血日期 106/01/20 懷孕? 是 否 上次備血時間: 106/01/20 09:14

申請預訂用血日期 106/07/09 YY/MM/DD 上午 下午 ON CALL HH:MM 需重新備血

| 血品名 | 已用 | 剩餘 | 預領 | 備血 | 單位 | 血品名 | 已用 | 剩餘 | 預領 | 備血 | 單位 |
|--|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|
| Whole Blood | | | | | U. | Fresh Blood | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> Store Blood | | | | | U. | Fresh Frozen Plasma | | | | | U. |
| Prepare blood amount desired (1U. = 250ml whole blood) | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Packed RBC | | 4 | | 4 | U. | Frozen Plasma | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> Leukocyte-Poor RBC | | | | | U. | Cryoprecipitate | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> Washed RBC | | | | | U. | WBC Concentrate | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> Deglycerized RBC | | | | | U. | WBC Pheresis | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> Platelet Pheresis | | | | | U. | Per. Blood Stem Cell | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> WBC Reduced PLT | | | | | U. | 其他 | | | | | U. |
| <input type="checkbox"/> Platelet Concentrate | | | | | U. | | | | | | U. |

備血醫囑開立(2)

備血完成後，即會產生一筆備血醫令

| (一般護理) | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|------|------|--------|-------|-----|------|-------------|
| 使用日 | 護理留言內容 | 頻 率 | 執行狀態 | 開立醫生 | 開立日 | 停用日 | 檢驗序號 | 使用日-時間 |
| 05/01 | 防護措施 | 標準防護 | | 李佩蓁 | 05/01 | / | 0 | 10605011319 |
| 05/01 | 轉送等級評估 (C級) | | | 李佩蓁 | 05/01 | / | 0 | 10605011319 |
| 07/09 | (常規備血)血品:Packed RBC 備血量:4 U | ST | | TQIP小組 | 07/09 | / | 0 | 10607091534 |

如為第一次備血或重新備血，則會加開一筆備血檢驗。
護理人員即依採檢流程進行相關採檢送檢作業。

| (檢驗/檢查 醫囑) | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-------|---------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|
| 申請日 | 檢驗名稱 | 執行狀態 | 檢體/器官名稱 | 急作否 | 開立醫生 | 檢驗日期 | 開單時間 | 申請序號 |
| 07/09 | Irregular Ab Screening test 不規則抗體 | 尚未採檢體 | Blood | N | TQIP小組 | 10607091534 | 10607091534 | 10607090027 |

輸血醫囑開立



開立方式即依右圖之數字順序進行輸入。

需特別注意的為輸血類型，一般輸血和血液疾病輸血帶出的處置衛材批價項目不同。

1. 血品名: Packed RBC 剩餘量:4 效期:10607121534

2. 輸血量: 1 總量: -1 單位: U

3. 輸血頻率: ST QD BID

4. 輸血速度: 一般 慢速 小兒 新生兒 緊急

5. 輸血類型: 一般輸血 血液疾病輸血

6. 起用日時: 106/07/09

7. 迄日日時: 106/07/16

8. 輸血注意事項: test

9. 確認新增 [F9]

開立完成後，即會產生一筆輸血醫令

| | | |
|-------|---|----|
| 07/09 | (常規輸血)血品:Packed RBC 輸血量:1 U 起日:1060709 迄日:1060709 輸血注意事項:test | ST |
|-------|---|----|

輸血醫囑停用(1)

| | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 常用處方箋 | <input type="checkbox"/> | 05/01 | 緊急生化檢驗單 Clinical Biochem. STAT |
| 藥品新增 | <input type="checkbox"/> | 05/01 | 血清免疫檢驗單 Clinical Immunoserology |
| | <input type="checkbox"/> | 05/01 | 生理、微生物檢驗單 EKG、Microbiology |
| | <input type="checkbox"/> | 05/01 | 生理、微生物檢驗單 EKG、Microbiology |
| 藥品修改 | <input type="checkbox"/> | 06/01 | 生化檢驗單 Clinical Biochemistry |
| 藥品停用 | <input type="checkbox"/> | 06/01 | 生化檢驗單 Clinical Biochemistry |
| 醫令停用 | <input checked="" type="checkbox"/> | 07/02 | [血液]檢驗 |
| 藥品全畫面 | <input type="checkbox"/> | 07/02 | [血液]檢驗 |
| 醫令全畫面 | <input type="checkbox"/> | 07/02 | [尿糞]檢驗 |
| 加入 組套 | <input type="checkbox"/> | 07/06 | L07 生理、微生物檢驗單 EKG、Microbiology |
| 門診 SOAP | <input type="checkbox"/> | 07/06 | L07 生理、微生物檢驗單 EKG、Microbiology |
| | <input type="checkbox"/> | 07/06 | L07 生理、微生物檢驗單 EKG、Microbiology |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 07/09 | (常規輸血)血品:Packed RBC 輸血量:1 U 起日:106 |

輸血醫令停用 (AdmBldOrdDel)

請選擇停用理由

病患自動出院 [02]
 病患自動出院 [02]
 病人發燒 [05]
 病患輸血反應 [06]
 病患病情改善 [07]
 預估錯誤 [08]
 病情惡化 [09]
 其他 [99]

如醫令停用時，血袋已出庫，則會新增一筆停用醫令

| 使用日 | 護理留言內容 | 頻率 |
|-------|--|------|
| 05/01 | 防護措施 | 標準防護 |
| 05/01 | 轉送等級評估 (C級) | |
| 07/09 | (常規備血)血品:Packed RBC 備血量:4 U | ST |
| 07/09 | 已停用(常規輸血)血品:Packed RBC 輸血量:1 U 起日:1060709 迄日:1060709 輸血注意事項:test | ST |

輸血作業 - 護理端

輸血回報 輸血作業 電子簽章 簽收作業 核

勻 篩 壓 肺 14天 營 跌 抽 入 出

輸血作業

床號 D-05

姓名 護*測試3

領血

血袋簽收

輸血開始

輸血結束

輸血回報

輸血記錄

寄存轉讓

離開

登入人員： 陳銘偉

領血

領血作業 @@ 【慈濟醫院 花蓮本院】 (Ver 104/08/25) 【電腦名稱： ; IP：】

操作人員：陳銘偉

| | | | | | | | |
|-------|--------|------|---------------|------|------|----------------|---------|
| 病歷號 | TEST3 | 病患姓名 | 護*測試3 | 床號 | D-05 | 生日 | 0940430 |
| 醫師 | TQIP小組 | 診斷 | Biopsy cornea | 性別 | 女 | 年齡 | 12歲 |
| 血型/Rh | B+ | 口述血型 | B | 檢驗血型 | B | 病歷首頁--- 病患自述血型 | |

請選擇血品

| 申請序號 | 醫囑序號 | 血品名稱 | 頻率 | 輸血起日 | 輸血迄日 | 申請醫師 | 血品效期 | 過濾 | |
|------|-------------|----------------------|----|------|-------------|-------------|------|-------------|---|
| 1 | 10607090027 | 106008871 Packed RBC | 1. | ST | 10607091555 | 10607091555 | TQIP | 10607121534 | 0 |

此病人之輸血醫令

過濾器 放射線照射

血品送達單位 01N123 測試護理站

| 血品名 | 總輸血量 | 已用 | 剩餘 | 今日輸血量 | 今日已領量 | 今日剩餘量 | 領血 | 單位 |
|------------|------|----|----|-------|-------|-------|----|----|
| Packed RBC | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | U. |

輸血注意事項

test

3. 申請確認

2. 離開

1. 點選兩下欲領血之醫令
2. 輸入領血數量
3. 申請確認

※ 第一次備血或重新備血，需待病人備血檢驗報告完成後才可進行領血
※ 如血品送達單位非本單位，需自行調整

血袋簽收

血袋簽收

護理站 01N123 日間照護 姓名 陳銘偉

傳送人員ID TQIP TQIP小組 日期 1060709

輸血袋附單BarCode 病歷號

查詢 切換使用者 離開

| 輸血袋附單 | 血袋貼紙 | 血袋動態 | 血品名稱 | 血袋號碼1 | 血袋號碼2 | 病患姓名 | 核對人員 | 核對時間 | 傳送人員 | 傳送時間 | 簽收人員 |
|------------|----------|------|------|------------|-------|-------|------|-------------|------|------|------|
| 1 A0032199 | C0048750 | 已簽收 | PRBC | 1234567890 | | 護*測試3 | 陳銘偉 | 07/09 16:38 | | | 陳銘偉 |

輸血開始(1)

輸血開始

床號 D-05 病歷號 TEST3 姓名 護*測試3 性別 女 年齡 008 血型 B+

主治醫師 TQIP小組 診斷 Biopsy cornea

| 血品名稱 | 單次輸血量(U) | 輸血頻率 | 輸血速度 | 開立日期 | 輸血注意事項 |
|------------|----------|------|------|------------|--------|
| Packed RBC | 1 | ST | 一般 | 1060709155 | test |

條碼訊息

1. 輸血者ID U120920761 陳銘偉 1060709164111

2. 病人手圈 病歷號 TEST3 護*測試3 1060709164112

3. 血袋貼紙 血品名稱

*註:

清除 確認 4. 離開

| 血品名稱 | 血袋貼紙 | 血袋號碼 | 病人姓名 | 輸血者 | 輸血開始時間 | 2U一袋 |
|------------|----------|------------|-------|-----|---------------|------|
| Packed RBC | C0048750 | 1234567890 | 護*測試3 | 陳銘偉 | 1060709164115 | N |

※底色 代表已完成確認

1. 刷入輸血者ID
2. 刷入病人手圈
3. 刷入血袋貼紙，系統會帶出該血袋對應的輸血醫令，即血袋資訊。
4. 確認
(如尚有輸血前Vital Sign未輸入，系統會導入輸入頁面。)

輸血開始(2) - 輸血前Vital Sign

(新)輸血反應回報作業 @@--【慈濟醫院 花蓮本院】(Ver 104/08/25)

病歷號 TEST3 護*測試3 D-05 女 年齡 12歲 血型 B + 主治醫師 TQIP小組

臨床診斷 Biopsy cornea 輸血反應

未回報之配血記錄清單(出庫72小時內)

| | 日期 | 時間 | 單位 | 血品 | 回報單位 | 回報反應 | 回報時間 |
|---|-----------|-------|----|------------|------|------|------|
| 1 | 106/07/09 | 16:37 | 1 | Packed RBC | D-05 | 未回報 | |

Vital Sign 資料暫存

執行時間 體溫 脈博 呼吸 收縮壓 舒張壓 記錄人員

選擇 輸血前 106/07/09 16:48 [] °C [] 次/Min [] 次/分 [] / [] mmHg [] 寫入TPR

選擇 輸血5分鐘後 // : [] °C [] 次/Min [] 次/分 [] / [] mmHg [] 寫入TPR

操作人員：陳銘偉 寫入輸血5分鐘後的護理紀錄

暫存 取消

方法一：點選前方〔選擇〕，選擇之前已量測的Vital Sign帶入

方法二：於頁面填寫，如欲帶入TPR，於後方勾選〔寫入TPR〕

輸血開始(3) - 輸血前Vital Sign

方法一：點選前方〔選擇〕，選擇之前已量測的Vital Sign帶入

請選擇要帶入的Vital Sign

1060709 16:21 ~ 1060709 16:51 查詢

| 日期 | 時間 | 體溫 | 部位 | 脈搏 | 呼吸 | 血壓 | 血壓位 | 備註 | 記錄者 |
|---------|------|------|----|----|----|--------|-----|----|-----|
| 1060709 | 1631 | 36.3 | ▽ | 76 | 23 | 130/76 | | | 陳銘偉 |

已選擇： 1060709 16:31

帶入輸血前 取消

Vital Sign 資料暫存

| | 執行時間 | 體溫 | 脈搏 | 呼吸 | 收縮壓 | 舒張壓 | 記錄人員 | |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|-----|------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 選擇 | 輸血前 106/07/09 16:31 | 36.3 °C | 76 次/Min | 23 次/分 | 130 / 76 mmHg | | | <input type="checkbox"/> 寫入TPR |
| <input type="checkbox"/> 選擇 | 輸血5分鐘後 // : | °C | 次/Min | 次/分 | / mmHg | | | <input type="checkbox"/> 寫入TPR |

操作人員： 陳銘偉 寫入輸血5分鐘後的護理紀錄

暫存 取消

輸血開始(4) - 輸血前Vital Sign

方法二：於頁面填寫，如欲帶入TPR，於後方勾選〔寫入TPR〕

Vital Sign 資料暫存

| | 執行時間 | 體溫 | 脈博 | 呼吸 | 收縮壓 | 舒張壓 | 記錄人員 |
|-----------------------------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|-----|---|
| <input type="button" value="選擇"/> | 輸血前 106/07/09 16:35 | 36.3 °C | 76 次/Min | 23 次/分 | 130 / 76 mmHg | | <input checked="" type="checkbox"/> 寫入TPR |
| <input type="button" value="選擇"/> | 輸血5分鐘後 // : | °C | 次/Min | 次/分 | / mmHg | | <input type="checkbox"/> 寫入TPR |

操作人員：陳銘偉 寫入輸血5分鐘後的護理紀錄

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|----|----|--------|--|---|--|-----|
| 1635 | 36.3 | ▽ | 76 | 23 | 130/76 | | 2 | | 陳銘偉 |
|------|------|---|----|----|--------|--|---|--|-----|

輸血開始(5)

輸血開始

床號 D-05 病歷號 TEST3 姓名 護*測試3 性別 女 年齡 008 血型 B+

主治醫師 TQIP小組 診斷 Biopsy cornea

| 血品名稱 | 單次輸血量(U) | 輸血頻率 | 輸血速度 | 開立日期 | 輸血注意事項 |
|------------|----------|------|------|------------|--------|
| Packed RBC | 1 | ST | 一般 | 1060709155 | test |

條碼訊息

輸血者ID

病人手圈
病歷號

血袋貼紙 血品名稱

*註:

清除 確認 離開

| 血品名稱 | 血袋貼紙 | 血袋號碼 | 病人姓名 | 輸血者 | 輸血開始時間 | 2U一袋 |
|------------|----------|------------|-------|-----|---------------|------|
| Packed RBC | C0048750 | 1234567890 | 護*測試3 | 陳銘偉 | 1060709164115 | N |

※底色 代表已完成確認

填寫完輸血前Vital Sign後，回到此頁面需按〔確認〕來完成存檔

輸血開始完成

| | 護理焦點/問題 | 開始日期 | 護理人員 | 結案日期 | 結案原因 | 護理人員 |
|---|---------|---------|------|------|------|------|
| 1 | 輸血開始 | 1060709 | 陳銘偉 | | | |
| 2 | 輸血5分鐘後 | 1060709 | 陳銘偉 | | | |
| 3 | 輸血中 | 1060709 | 陳銘偉 | | | |
| 4 | 輸血結束 | 1060709 | 陳銘偉 | | | |

| 日期 | 時間 | 護理焦點/問題 | | 護理記錄 | 記錄者 |
|---------|------|---------|---|---|-----|
| 1060709 | 1656 | 輸血開始 | D | 1.T : 36.3 °C ; P : 76 /Min ; R : 23 /Min ; BP : 130 / 76 mmHg ; | |
| | | | | 2.輸血原因：手術前備血 | |
| | | | T | 1.指導安全注意事項，預防跌倒。 2.輸血過程若發現留置針周圍有紅腫熱痛，請立即告知護理人員。 | |
| | | | | 3.輸血過程若有發燒、寒顫、呼吸喘、胸背痛、皮膚癢、皮膚紅疹、尿液變紅，可能為輸血反應，請立即告知護理人員。 | |
| | | | A | 1.刷barcode核對病人，血品：Packed RBC，血型：B，血袋號碼：123 4567890，Rh因子：+，有效期限106年07月09日無誤後，掛上血袋輸注中 | 陳銘偉 |

輸血5分鐘後

輸血作業

床號 D-05
姓名 護*測試3

領血
血袋簽收
輸血開始
輸血結束
輸血回報
輸血記錄
寄存轉讓
離開

登入人員： 陳銘偉

(新)輸血反應回報作業 @@--【慈濟醫院 花蓮本院】(Ver 104/08/25)

病歷號 TEST3 護*測試3 D-05 女 年齡 12歲 血型 B + 主治醫師 TQIP小組
臨床診斷 Biopsy comea 輸血反應

未回報之配血記錄清單(出庫72小時內)

| | 日期 | 時間 | 單位 | 血品 | 回報單位 | 回報反應 | 回報時間 |
|---|-----------|-------|----|------------|------|------|------|
| 1 | 106/07/09 | 16:37 | 1 | Packed RBC | D-05 | 未回報 | |

級數 一級反應
顏色 二級反應
表示 三級反應

暫存【Vital Sign 資料暫存】 轉換【轉換血袋之回報單位】 回報【輸血Vital Sign及反應】

Vital Sign 資料暫存

| 選擇 | 輸血前 | 執行時間 | 體溫 | 脈搏 | 呼吸 | 收縮壓 | 舒張壓 | 記錄人員 | 寫入TPR |
|----|--------|-----------------|---------|----------|--------|-------|---------|------|--------------------------|
| | | 106/07/09 16:35 | 36.3 °C | 76 次/Min | 23 次/分 | 130 / | 76 mmHg | 陳銘偉 | <input type="checkbox"/> |
| | 輸血5分鐘後 | 106/07/09 17:08 | °C | 次/Min | 次/分 | / | mmHg | | <input type="checkbox"/> |

操作人員： 陳銘偉 寫入輸血5分鐘後的護理紀錄

暫存 取消

輸血5分鐘後完成

| | | | | |
|------|--------|---|--|-----|
| 1708 | 輸血5分鐘後 | D | 1.T : 37.2 °C ; P : 78 /Min ; R : 27 /Min ; BP : 132 / 81 mmHg ; | |
| | | | 2.血品 : Packed RBC , 血型 : B , 血袋號碼 : 1234567890 , Rh因子 : + | 陳銘偉 |

輸血結束(1)

輸血結束

床號 D-05 病歷號 TEST3 姓名 護*測試3 性別 女 年齡 008 血型 B+

主治醫師 TQIP小組 診斷 Biopsy cornea

條碼訊息

1. 護理人員ID U120920761 陳銘偉 1060709171310

2. 病人手圈病歷號 TEST3 護*測試3 1060709171310

最後一袋血袋，系統會自動帶入 TPR/BP 及輸血反應的護理紀錄

3. 血袋貼紙 血品名稱

4. 輸血完畢

清除 離開

| 存檔否 | 血品名稱 | 血袋貼紙 | 血袋號碼 | 病人姓名 | 護理人員 | 輸血開始時間 | 輸血結束時間 | 是否為最後一袋 | 2U一袋 |
|-----|------------|----------|-----------|-------|------|---------------|----------------|---------|------|
| | Packed RBC | C0048750 | 123456789 | 護*測試3 | 陳銘偉 | 1060709164115 | 1060709171315Y | | N |

※底色 代表已完成確認

1. 刷入輸血者ID
2. 刷入病人手圈
3. 刷入血袋貼紙
4. 確認

(如刷入的為最後一袋血，系統會詢問是否要順便進行輸血回報)

輸血結束(2) - 輸血回報

(新)輸血反應回報作業 @@--【慈濟醫院 花蓮本院】(Ver 104/08/25)

病歷號 TEST3 **護*測試3** **D-05** **女** **年齡** 12歲 **血型** B + **主治醫師** TQIP小組
臨床診斷 Biopsy cornea **輸血反應**

未回報之配血記錄清單(出庫72小時內)

| 日期 | 時間 | 單位 | 血品 | 回報單位 | 回報反應 | 回報時間 |
|-----------|-------|----|------------|------|------|------|
| 106/07/09 | 16:37 | 1 | Packed RBC | D-05 | 未回報 | |

一級反應
 二級反應
 三級反應

暫存【Vital Sign 資料暫存】 轉換【轉換血袋之回報單位】 回報【輸血Vital Sign及反應】

(新)輸血反應回報作業 @@--【慈濟醫院 花蓮本院】(Ver 104/08/25)

病歷號 TEST3 **護*測試3** **D-05** **女** **年齡** 12歲 **血型** B + **主治醫師** TQIP小組
臨床診斷 Biopsy cornea **輸血反應**

血袋資料

| | 記錄時間 | 體溫 | 脈博 | 呼吸 | 收縮壓 | 舒張壓 | 記錄人員 |
|--------|-----------------|---------|----------|--------|---------------|-----|--------------------------------|
| 輸血前 | 106/07/09 16:35 | 36.3 °C | 76 次/Min | 23 次/分 | 130 / 76 mmHg | | 陳銘偉 |
| 輸血5分鐘後 | 106/07/09 17:08 | 37.2 °C | 78 次/Min | 27 次/分 | 132 / 81 mmHg | | 陳銘偉 |
| 輸血後 | | °C | 次/Min | 次/分 | mmHg | | <input type="checkbox"/> 寫入TPR |

病患當日開刀 病患發燒中
 1.勾選上述任一選項，系統則不對輸血前後體溫上升1°C以上做監控
 2.麻醉中，請勾選『當日開刀』

特殊個案：
 3.勾選『特殊個案』選項，不必輸入Vital Sign、輸血反應。

無反應項目之症狀

級數顏色表示 **輸血時間**
 一級反應 起始 106/07/09 16:56
 二級反應 結束 106/07/09 17:26
 三級反應

確認 取消

| 血品 | 血袋號碼 | 血型 | Rh | 回報反應 | 回報反應 | 回報反應 | 回報反應 | 回報反應 |
|------|------------|------------|----|------|------|------|------|------|
| 反應項目 | Packed RBC | 1234567890 | B | + | | | | |

輸血結束(3)

輸血結束

床號 D-05 病歷號 TEST3 姓名 護*測試3 性別 女 年齡 008 血型 B+

主治醫師 TQIP小組 診斷 Biopsy cornea

條碼訊息

護理人員ID U120920761 陳銘偉 1060709171310

病人手圈病歷號 TEST3 護*測試3 1060709171310

最後一袋血袋，系統會自動帶入 TPR/BP 及輸血反應的護理紀錄

血袋貼紙 血品名稱

清除 輸血完畢 離開

| 存檔否 | 血品名稱 | 血袋貼紙 | 血袋號碼 | 病人姓名 | 護理人員 | 輸血開始時間 | 輸血結束時間 | 是否為最後一袋 | 2U一袋 |
|-----|------------|----------|-----------|-------|------|---------------|---------------|---------|------|
| | Packed RBC | C0048750 | 123456789 | 護*測試3 | 陳銘偉 | 1060709164115 | 1060709171315 | Y | N |

※底色 代表已完成確認

填寫完輸血回報後，回到此頁面需按〔確認〕來完成存檔

輸血結束完成

| | | | | |
|------|------|---|--|-----|
| 1730 | 輸血結束 | D | 1.T : 37.5 °C ; P : 79 /Min ; R : 22 /Min ; BP : 130 / 85 mmHg ; | |
| | | | 2.血品 : Packed RBC , 血型 : B , Rh因子 : + | |
| | | R | 1.輸血反應 : 體溫上升1-2°C以下 | 陳銘偉 |

輸血結束當下未輸血回報

輸血回報 -> 勾選欲回報的血品 -> 回報 -> 填寫回報內容 -> 確認

(新)輸血反應回報作業 @@--【慈濟醫院 花蓮本院】(Ver 104/08/25)

病歷號 TEST3 護*測試3 D-05 女 年齡 12歲 血型 B + 主治醫師 TQIP小組
臨床診斷 Biopsy cornea **輸血反應**

血袋資料

| | 記錄時間 | 體溫 | 脈博 | 呼吸 | 收縮壓 | 舒張壓 | 記錄人員 |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------|---------------|---------|------|
| 輸血前 | 106/07/09 16:35 | 36.3 °C | 76 次/Min | 23 次/分 | 130 / 76 mmHg | 76 mmHg | 陳銘偉 |
| 輸血5分鐘後 | 106/07/09 17:08 | 37.2 °C | 78 次/Min | 27 次/分 | 132 / 81 mmHg | 81 mmHg | 陳銘偉 |
| 輸血後 | | 37.5 °C | 79 次/Min | 22 次/分 | 130 / 85 mmHg | 85 mmHg | |

選擇 寫入TPR

病患當日開刀 病患發燒中
 1.勾選上述任一選項，系統則不對輸血前後體溫上升1°C以上做監控
 2.麻醉中，請勾選『當日開刀』

特殊個案：
 3.勾選『特殊個案』選項，不必輸入Vital Sign、輸血反應。

帶入護理紀錄

級數顏色表示 **輸血時間**
 一級反應 起始 106/07/09 16:56
 二級反應 結束 106/07/09 17:30
 三級反應

確認 取消

| 血品 | 血袋號碼 | 血型 | Rh | 回報反應 | 回報反應 | 回報反應 | 回報反應 | 回報反應 |
|------------------------|------------|----|----|---------|------|------|------|------|
| 反應項目 Packed RBC | 1234567890 | B | + | 無反應項目之症 | | | | |

End